
ワンタフトブラシ使い方カード

初めてワンタフトブラシを使う患者さんは、磨き方がわからない可能性が。このカードを合わせてお渡しすることで、リスク部位を意識した成果の出るケア方法が自然と身に付きます。

<記入例>

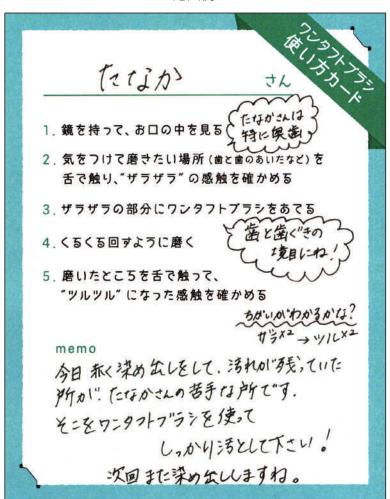

- 1. 鏡を持って、お口の中を見る
- 2. 気をつけて磨きたい場所 (歯と歯のあいだなど) を 舌で触り、"ザラザラ" の感触を確かめる
- 3. ザラザラの部分にワンタフトブラシをあてる
- 4. くちくち回すように磨く
- 5. 磨いたとこちを舌で触って、 "ツルツル"になった感触を確かめる

memo

さんさい

1. 鏡を持って、お口の中を見る

- 2. 気をつけて磨きたい場所 (歯と歯のあいだなど) を 舌で触り、"ザラザラ" の感触を確かめる
- 3. ザラザラの部分にワンタフトブラシをあてる
- 4. くちくち回すように磨く
- 5. 磨いたとこちを舌で触って、 "ツルツル"になった感触を確かめる

memo

1. 鏡を持って、お口の中を見る

- 2. 気をつけて磨きたい場所 (歯と歯のあいだなど) を 舌で触り、"ザラザラ" の感触を確かめる
- 3. ザラザラの部分にワンタフトブラシをあてる
- 4. くるくる回すように磨く
- 5. 磨いたところを舌で触って、 "ツルツル"になった感触を確かめる

memo

±4.

1. 鏡を持って、お口の中を見る

- 2. 気をつけて磨きたい場所 (歯と歯のあいだなど)を 舌で触り、"ザラザラ" の感触を確かめる
- 3. ザラザラの部分にワンタフトブラシをあてる
- 4. くるくる回すように磨く
- 5. 磨いたとこちを舌で触って、 "ツルツル"になった感触を確かめる

memo